


Milchprobenentnahme

Vorbereitung: Röhrchen beschriften (Besitzer, Tieridentifikation, Viertelbezeichnung, ggf. Vorbehandlungen,...)

Vorgehen:

- grobe Verschmutzung an Zitzen vorher entfernen
- Hände reinigen oder Einweghandschuhe anziehen
- 2-3 Milchstrahlen in Schalmtest-Schale abmelken
- Zitzenkuppe desinfizieren mit Desinfektionstüchlein

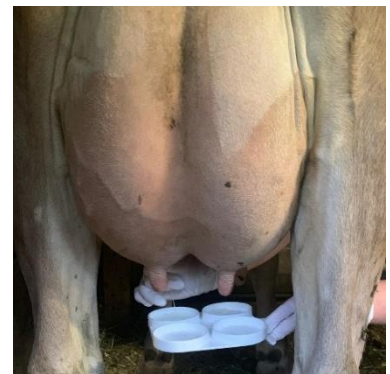

Falls mehrere Viertel zu beproben sind:

- ➔ Desinfektion beginnend bei der am weitesten entfernten Zitze bis hin zur nächsten
- ➔ Entnahme umgekehrt

Probenentnahme:

Röhrchen nach unten öffnen und Deckel zwischen Nachbarfingern einklemmen

➔ *Nicht ablegen oder in den Mund nehmen!*

Röhrchen möglichst waagerecht halten, um zu vermeiden, dass Schmutzpartikel hineinfallen

Zitze schräg halten und Röhrchen zu ca. 2/3 befüllen

Röhrchen verschliessen

- ➔ *Bei dem ganzen Vorgang darauf achten, Innenseite und Rand von Deckel und Röhrchen nicht zu berühren!*
(keine Berührung bereits desinfizierter Zitze)